




“延陵电子” 及产品简介




2017年6月

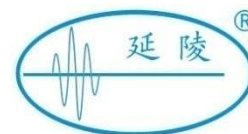

目 录

- 一 延陵公司简介
 - 二 高频电刀及其配件简介
 - 三 自动气压止血带和关节康复器简介
 - 四 吻（缝）合器简介
 - 五 微创诊疗器械简介
 - 六 骨科和超声刀系统简介
-

一、延陵公司简介

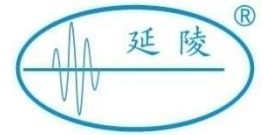


常州市延陵电子设备有限公司成立于**1992**年，主要从事**医用高频电刀及配件**、ATS止血带、CPM关机康复器的研制和销售。

公司有两个生产基地，新厂区座落在风景如画的西太湖畔，建筑面积达40000平方米，其中净化车间4000平方米。公司现有员工中，专业技术人员占50%以上，产品的研发、检验、检测等主要岗位均由专业技术人员担任。



一、延陵公司简介

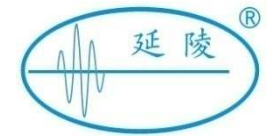


延陵公司下属有三个控股子公司：

常州贺利氏微创医疗器械有限公司主要从事吻合器类器械的研发和生产、内窥镜下微创诊疗器械的研发和生产；

常州市南翔医疗器械有限公司主要从事骨科上使用的接骨板的研发和生产；

常州瑞捷生物科技有限公司主要从事超声刀手术系统的研发和生产。

二、高频电刀及其配件简介

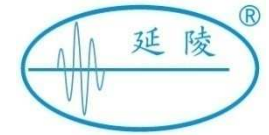

高频电刀：主机展示



POWER-420B型高频电刀



POWER-420D型高频电刀




POWER-420A型高频电刀



POWER-420BM型高频电刀

二、高频电刀及其配件简介

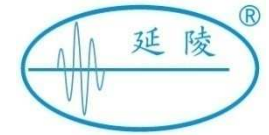

高频电刀：主机展示



POWER-420X型高频电刀



POWER-420M型高频电刀




POWER-420M2型高频电刀



POWER-420BIP型高频电刀

二、高频电刀及其配件简介

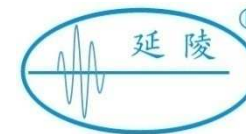

高频电刀：主机展示




POWER-420FX型高频电刀




POWER-420L型高频电刀

二、高频电刀及其配件简介

高频电刀配件：电刀笔展示

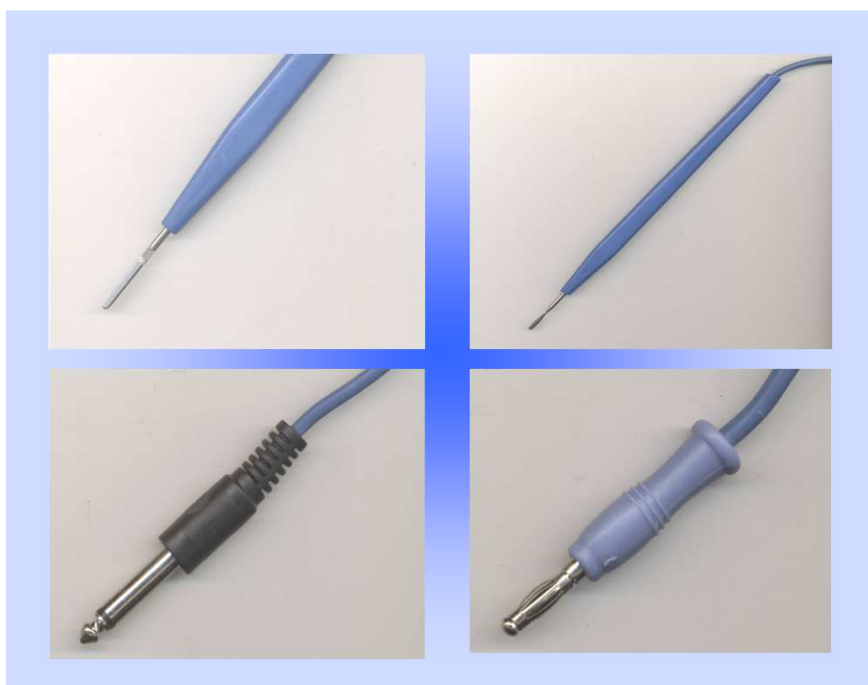

YLDB-01型脚控高频电刀笔

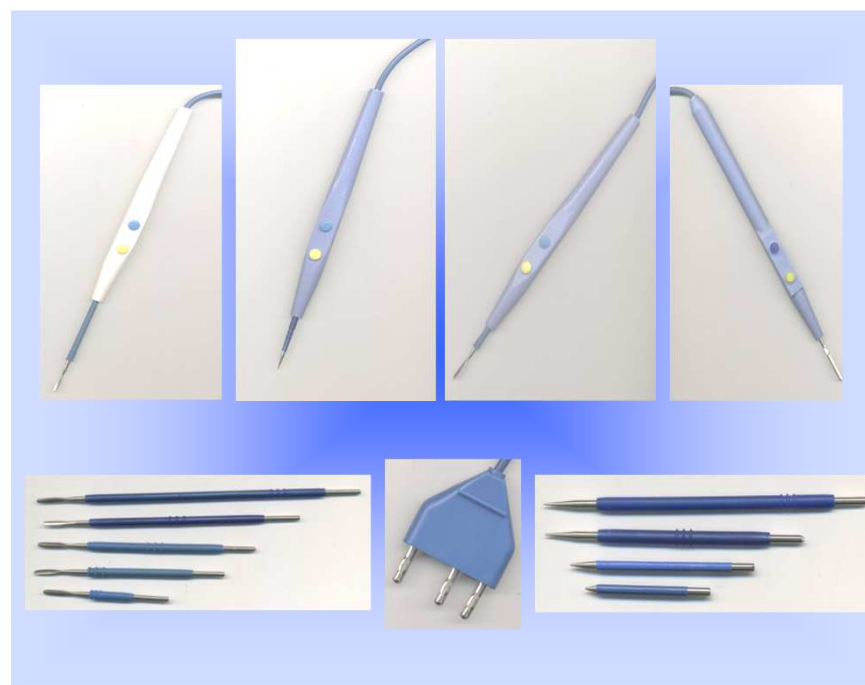


YLDB-02型一次性使用高频电刀笔

二、高频电刀及其配件简介

高频电刀配件：电刀笔展示



YLD-03型一次性使用高频电刀笔

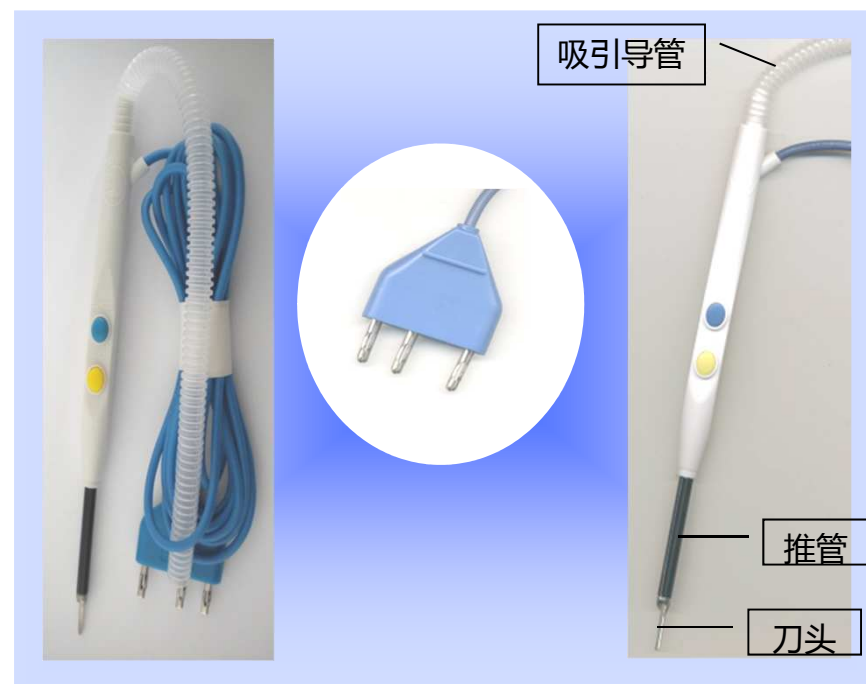

YLD-04型吸刮式电刀笔

二、高频电刀及其配件简介


高频电刀配件：电刀笔展示



可反复使用防水电刀笔



可高温高压灭菌电刀笔盒

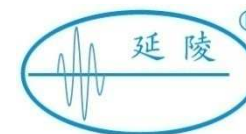


二、高频电刀及其配件简介

高频电刀配件：电极板展示


“延陵”品牌的POWER420-NP1、POWER420-NP3极板独特的安全封边设计，杜绝了因高频率电流“趋肤”效应所引起的极板烫伤事故，使极板在电刀中的使用更为安全可靠。

延陵极板适合于各种进口、国产品牌的电刀使用。

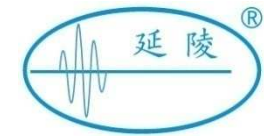


二、高频电刀及其配件简介

高频电刀配件：电极板展示

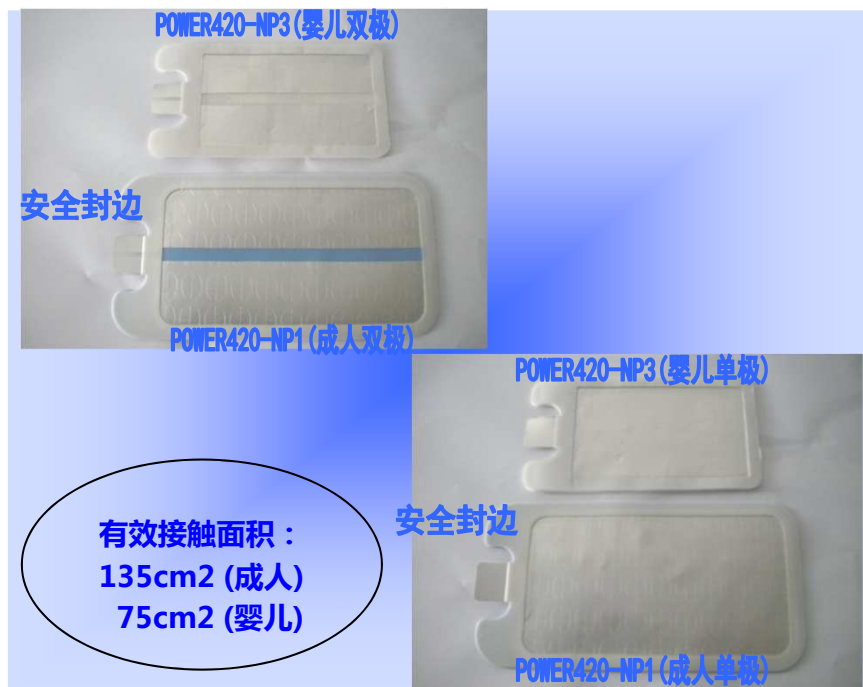


有效接触面积：
135cm² (成人)
75cm² (婴儿)

一次性安全性单极和双极电极板：
NP1成人；NP3婴儿

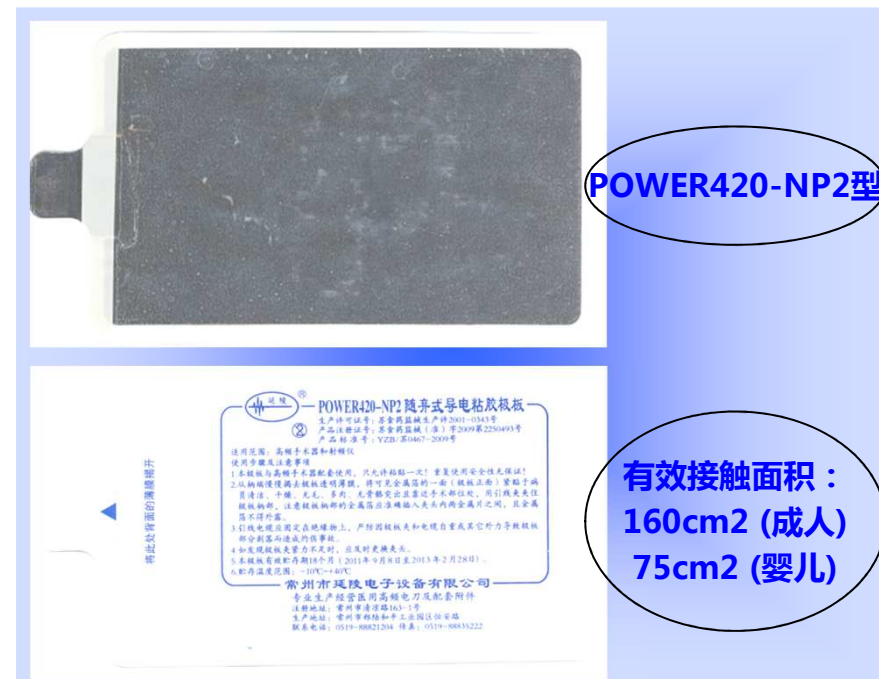

一次性普通单极板
NP2成人、婴儿

二、高频电刀及其配件简介

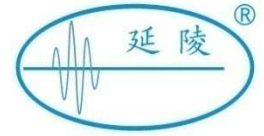

高频电刀配件：电极板展示




一次性带线成人双极板



一次性带线儿童双极板

二、高频电刀及其配件简介

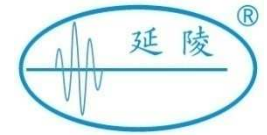


高频电刀配件：电极板展示




二、高频电刀及其配件简介

高频电刀配件：电极板展示

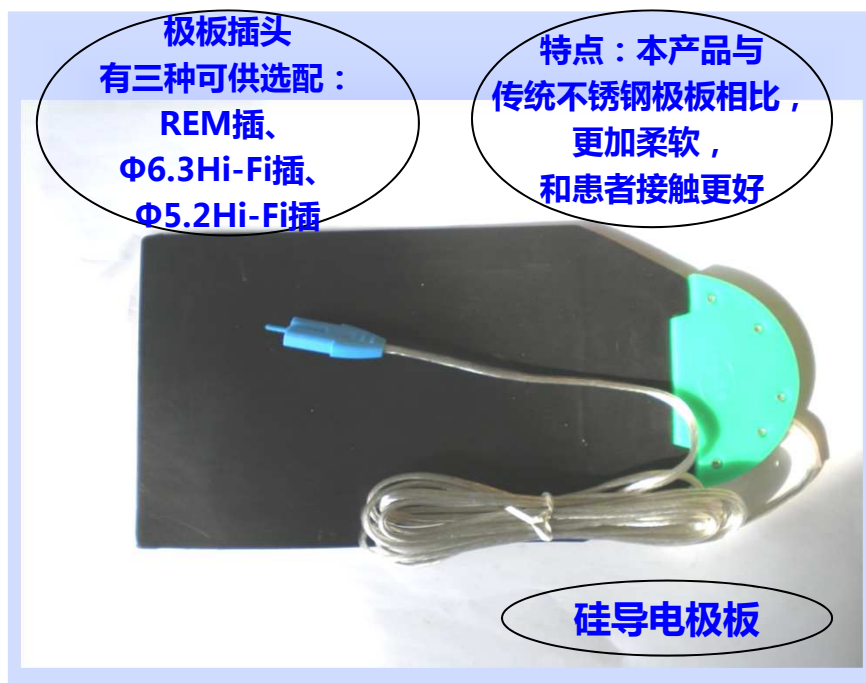


硅胶导电极板

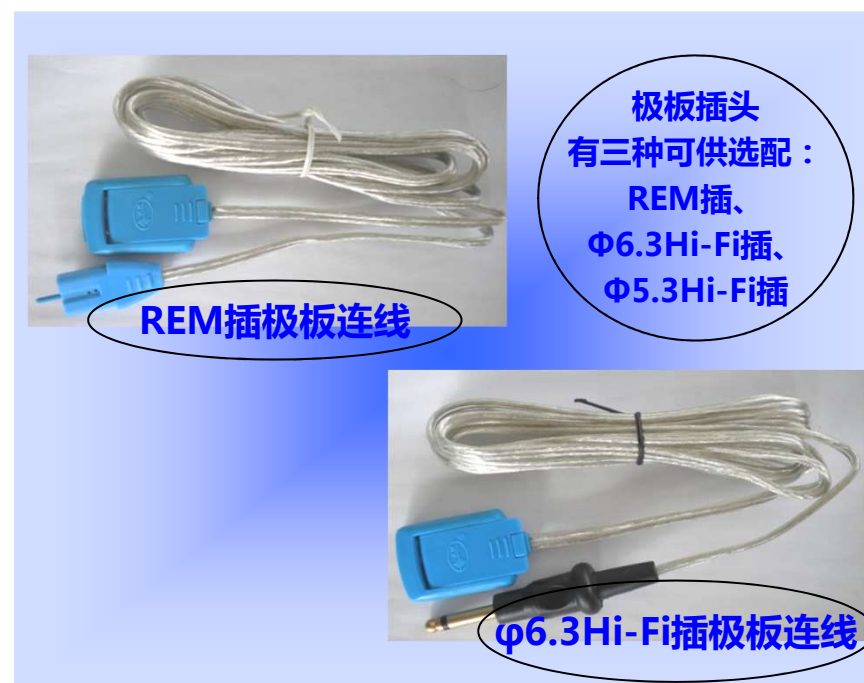

负极板连线

二、高频电刀及其配件简介

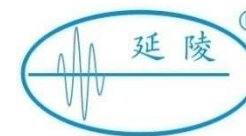

高频电刀配件：电凝镊展示

一次性水冷不沾电凝镊的特点

1. 镊尖滴水可有效降低手术凝血部位周边组织的温度，防止对其它组织的过度凝结，达到提高手术质量，减少后遗症、并发症发生的目的。
2. 由于镊尖不断滴渗生理盐水，避免了镊尖的组织沾粘，医生的凝血操作更流畅、顺利，可提高凝血效果、缩短手术时间。
3. “延陵”牌一次性水冷不沾电凝镊采用 $\Phi 4.0\text{mm}$ 自由插头与主机连接，可配合进口、国产多种品牌双极电凝器使用。
4. “延陵”一次性水冷不沾电凝镊选用与人体组织相容性较好的优质医用不锈钢材料制作。其镊尖的强度和柔性在高频产生的热量下均达最佳状态。由于本公司也是双极电凝器的生产厂家，故而所产一次性水冷不沾电凝镊与双极电凝器能很好的兼容。
5. “延陵”产品充分考虑了节能、环保的要求，真正做到生产的医疗产品“绿色、环保”。

一次性水冷不沾电凝镊使用注意事项

1. 此产品为一次性使用的无菌产品，使用前应确认包装无破损尚可拆封，否则严禁使用；
2. 本产品灭菌有效期为两年；
3. 本产品打开灭菌包装后，先将一次性水冷不沾电凝镊的输液管与生理盐水瓶有效连接，需先试“滴”，确认生理盐水能从镊尖滴水孔顺畅滴出，关闭输液开关备用（使用时需打开输液开关，并用此开关控制生理盐水的滴渗速度）；
4. 手术过程中应及时用纱布抹去镊尖上的组织附着物，确保滴水口畅通；
5. 电凝镊的镊尖应避免短路，防止镊尖变毛糙影响手术效果。

水冷镊 产品型号规格及基本尺寸

产品型号	产品描述
FCY1A	一次性单路水冷不沾黄铜电凝镊
FCY2A	一次性双路水冷不沾黄铜电凝镊
FCY1B	一次性单路水冷不沾银铜合金电凝镊
FCY2B	一次性双路水冷不沾银铜合金电凝镊

基本尺寸			
长度规格	镊子总长度 a	镊尖长度 b	镊子电缆长度
190	190±8	10±3	≥2.3m
200	200±8		
210	210±8		
220	220±8		
230	230±8		
250	250±8		



$\Phi 4.0\text{mm}$ 自由插头

双滴

单滴

二、高频电刀及其配件简介

高频电刀配件：清洁片展示

一次性电刀清洁片的特点

➤ 高效性

快速有效清洁电刀等锐利器械上的烧焦组织及其他附着物。

可大大地减少因残留烧焦组织或异物引起的手术切口非细菌性炎症反应。

可提高电切、电凝的效率，有效缩短手术时间。

➤ 安全可靠

表面无异物脱落。

采用组织级SiO₂ 精细清洁涂层，对器械无损伤。

背衬钡线，供术后安全检查。

➤ 方便性

使烦琐的器械清洁变得简单

➤ 适用范围

主要用于手术电刀的清洁，还可用于眼科、口腔科、耳鼻喉科、妇产科的器械清洁。

电刀清洁片的使用




检查无菌包装，若无破损即将包装拆开，取出清洁片

将清洁片粘在手术铺巾或手术衣等方便的地方

将电刀或电凝镊、腔镜电切棒及电凝棒等器械在清洁片上轻轻擦拭即可

用完后请将此清洁片扔掉

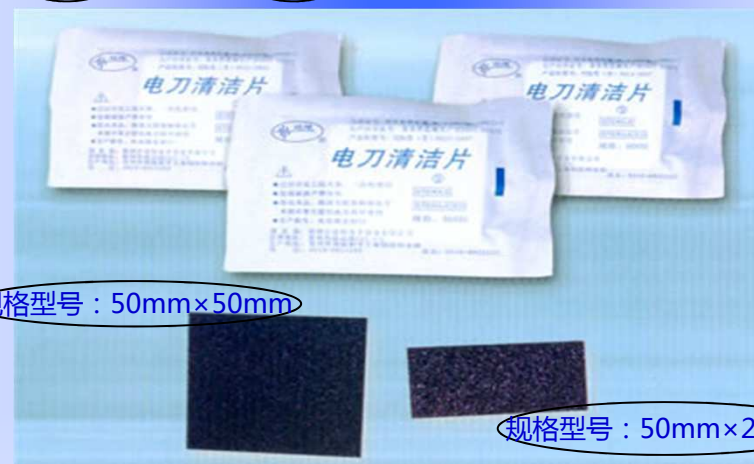

规格型号：50mm×50mm

规格型号：50mm×25mm


二、高频电刀及其配件简介

高频电刀配件：各类电极展示

精细电极



LEEP电极

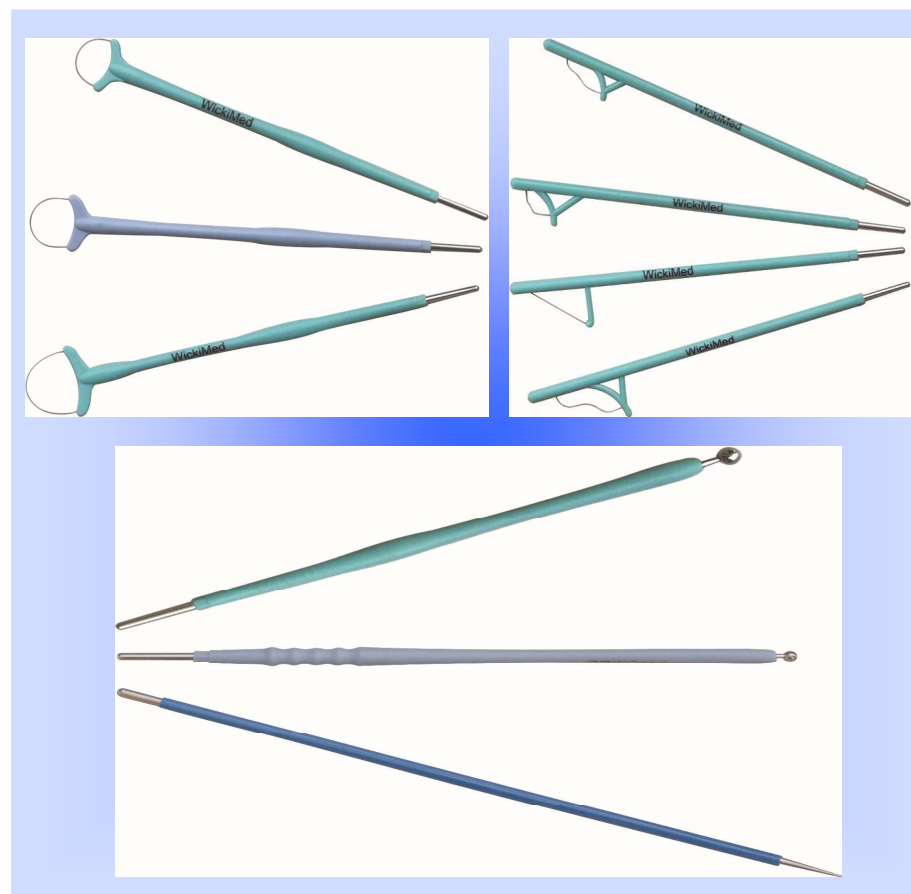

三、自动气压止血带和关节康复器简介

自动气压止血带展示


ATS-I 双路



ATS-I 单路



三、自动气压止血带和关节康复器简介

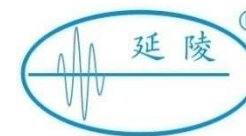


下肢关节康复器展示

最新一代下肢关节康复器



四、吻（缝）合器简介

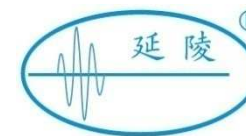

控股子公司：常州贺利氏微创医疗器械有限公司

主要产品包括：肛肠吻合器（PPH）、吻合器、缝合器、一次性使用荷包吻合器、一次性使用皮肤吻合器、自动痔疮套扎器套装（RPH）、活检钳、球囊扩张导管、镍钛记忆合金自扩张式支架及输送装置、一次性使用细胞刷、内窥镜结扎器、一次性硬化剂注射针等



GWH系列一次性使用管型吻合器



ZWH系列一次性使用直线吻合器及吻合组件



GGW系列一次性使用肛肠吻合器



HQW系列一次性使用弧形切割吻合器及吻合组件
(小凯图)

四、吻（缝）合器简介

控股子公司：常州贺利氏微创医疗器械有限公司



HQW系列一次性使用弧形切割吻合器及吻合组件
(大凯图)



ZQW系列一次性使用直线切割吻合器及吻合组件



ZZW系列一次性使用自动直线吻合器及吻合组件



HWH系列一次性使用荷包吻合器




PWH系列一次性使用皮肤吻合器



腔镜吻合器


五、微创诊疗器械简介

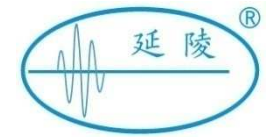

控股子公司：常州贺利氏微创医疗器械有限公司




HM系列一次性内镜用软管式活组织取样钳

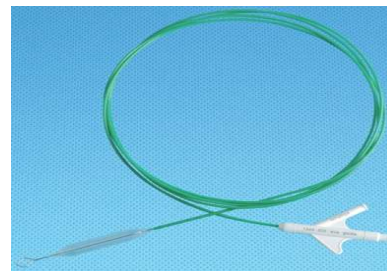


HM系列一次性球囊扩张导管



HM型食道贲门狭窄扩张器

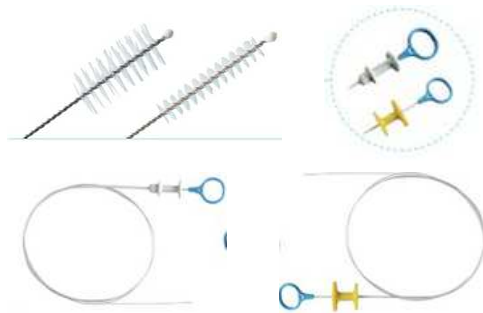

HM系列一次性细胞刷

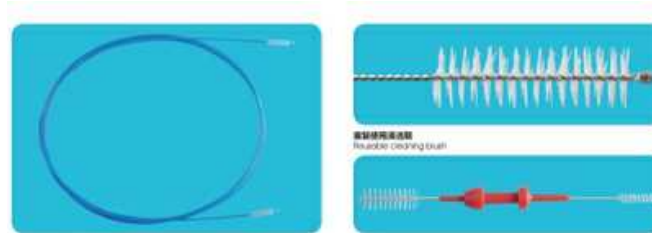


清洁刷



一次性口垫

五、微创诊疗器械简介

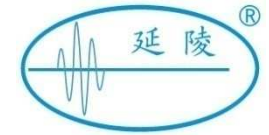

控股子公司：常州贺利氏微创医疗器械有限公司




多环痔疮套扎器套装




内镜用结扎器

六、骨科和超声刀系统简介

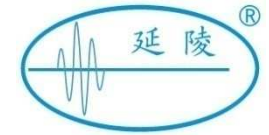

控股子公司：
常州市南翔医疗器械有限公司

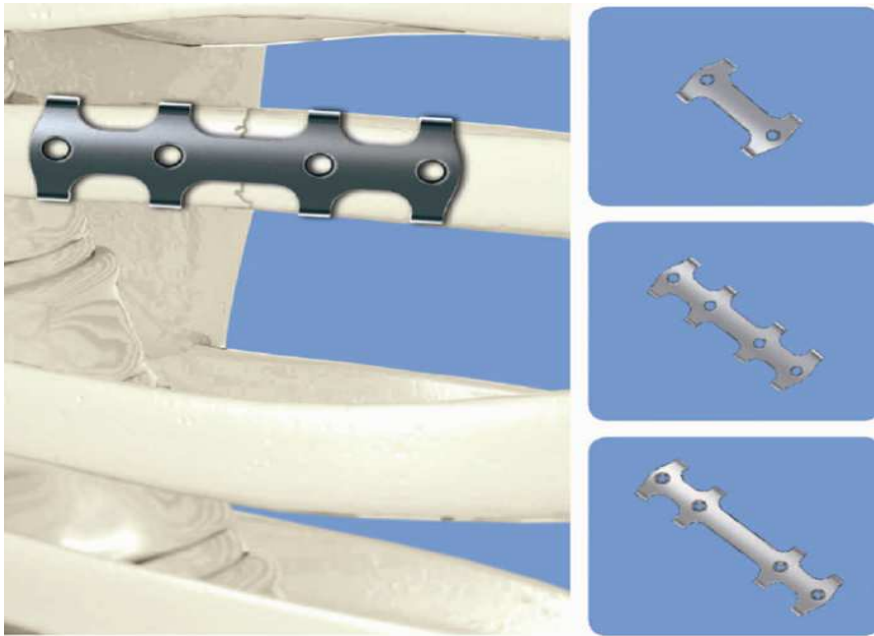


加压及保护性肋骨重建型接骨钢板

控股子公司：
常州瑞捷生物科技有限公司



超声手术刀系统

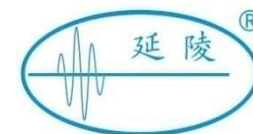

汇报结束

THANKS